

# g eemarc™ AMPLIDECT295SOS-PRO

Hear the Difference

Français

Notice



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1.</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> .....	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE</b> .....	<b>2</b>
2.1	Contenu de l'emballage .....	2
2.2	Emplacement.....	2
2.3	Connectez la Station de Base .....	3
2.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	4
2.5	Installer le pendentif.....	5
<b>3.</b>	<b>APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE</b> .....	<b>6</b>
3.1	Vue d'ensemble du combiné.....	6
3.2	Vue d'ensemble de la Base .....	9
3.3	Vue d'ensemble du pendentif.....	11
3.4	Symboles et icônes de l'affichage LCD du combiné .....	13
3.5	Structure du Menu du combiné.....	15
3.6	Texte et tableau d'entrée à chiffres .....	16
3.6.1	Caractères français.....	16
<b>4.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE PENDENTIF</b> .....	<b>17</b>
4.1	Appels d'urgence SOS.....	17
4.1.1	Réglages SOS à partir du combiné sans fil.....	17
4.1.2	Faire un appel d'urgence SOS.....	17
4.1.3	Sélection du langage SOS.....	17
4.1.4	Enregistrement d'un Messages SOS .....	18
4.1.5	Écouter le Message d'urgence SOS .....	18
4.2	Touches de mémoire M1/M2 .....	18
4.2.1	Définir les touches mémoires directes dans le combiné ...	18
4.2.2	Faire des appels à l'aide des touches M1/M2 .....	18
<b>5.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE</b> .....	<b>19</b>
5.1	Passer un appel externe .....	19
5.1.1	Pré numérotation .....	19
5.1.2	Sélection directe .....	19
5.1.3	Appelez à partir du répertoire.....	19
5.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels.....	19
5.1.5	Appelez à partir de la liste des numéros bis .....	20
5.1.6	Minuterie d'appel .....	20
5.2	Répondre à un appel.....	20
5.3	Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur .....	20
5.4	Volume amplifié .....	21
5.5	Terminer un appel.....	21
5.6	Mettre un appel en sourdine .....	21
5.7	Mode silencieux du combiné .....	21
5.8	Verrouillage clavier du combiné .....	22
5.9	Recomposer le dernier numéro composé.....	22
5.9.1	Recomposer un numéro depuis la liste les numéros bis.....	22
5.9.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire .....	22

	5.9.3	Supprimer un numéro de rappel.....	22
	5.9.4	Supprimer toute la liste de rappel.....	23
5.10		Recherche du combiné .....	23
5.11		Effectuer un appel interne .....	23
	5.11.1	Intercom.....	23
	5.11.2	Appeler tous les dispositifs sans fil.....	24
	5.11.3	Transférer un appel externe .....	24
	5.11.4	Faire un appel de conférence à 3.....	24
<b>6</b>		<b>REPertoire TÉLÉPHONIQUE .....</b>	<b>25</b>
	6.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique.....	25
	6.2	Recherche d'un contact .....	25
	6.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique .....	25
	6.4	Modifier une entrée dans le répertoire téléphonique.....	26
	6.5	Supprimer un contact téléphonique.....	26
	6.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire .....	26
	6.7	Etat du répertoire .....	27
	6.8	Définir les numéros de numérotation rapide.....	27
	6.8.1	Ajouter ou modifier une touche de numérotation rapide .....	27
	6.8.2	supprimer un numéro de numérotation rapide .....	27
<b>7</b>		<b>AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) ..</b>	<b>28</b>
	7.1	Afficher le journal d'appel.....	28
	7.2	Enregistrer un numéro du journal d'appel dans le répertoire .....	28
	7.3	Supprimer une entrée dans le journal des appels .....	29
	7.4	Supprimer tous les journaux .....	29
<b>8</b>		<b>PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE.....</b>	<b>30</b>
	8.1	Paramètres de l'horloge.....	30
	8.2	Réglages de l'alarme (combiné uniquement).....	31
	8.3	Réglages du combiné sans fil .....	32
	8.3.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes ..	32
	8.3.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes ..	32
	8.3.3	Régler le Volume de la sonnerie.....	32
	8.3.4	Définir la Tonalités d'alerte.....	33
	8.3.5	Sélectionnez la Base .....	33
	8.3.6	Définir la langue du combiné.....	33
	8.3.7	Renommez le combiné .....	33
	8.3.8	Choisissez les données à afficher à l'écran.....	34
	8.3.9	Définir la réponse Auto .....	34
	8.4	Réglages de la base en utilisant le combiné .....	35
	8.4.1	Régler la mélodie de sonnerie .....	35
	8.4.2	Dés-enregistrer un combiné.....	35
	8.4.3	Définissez le Mode de numérotation .....	35
	8.4.4	Régler le temps du Flash.....	36
	8.4.5	Définir l'interruption d'appel.....	36
	8.4.6	Changer le Code PIN du système.....	36
	8.5	Enregistrement d'un système sans fil.....	37
	8.6	Réinitialiser votre téléphone.....	38

<b>9</b>	<b>REGLAGES RÉPONDEUR .....</b>	<b>39</b>
8.7	Répondeur commutation marche/arrêt .....	39
8.8	Écouter les Messages du répondeur .....	39
8.9	Supprimer tous les Messages du répondeur .....	40
8.10	Enregistrement Mémoire d'un mémo .....	41
8.11	Réglages du répondeur (Base seulement) .....	41
8.11.1	Définir le Mode de réponse .....	41
8.11.2	Enregistrement de l'annonce de votre répondeur .....	42
8.11.3	Lecture de l'annonce .....	42
8.11.4	Supprimer une annonce personnalisée .....	43
8.11.5	Définir le Mode de réponse .....	43
8.11.6	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant .....	43
8.11.7	Définir la langue du répondeur .....	44
8.11.8	Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement .....	44
8.11.9	Modifier le taux de Compression .....	44
8.11.10	Activer l'accès à distance .....	45
8.11.10.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance .....	45
8.11.10.2	Activer ou désactiver l'accès à distance .....	45
9.5.10.3	Interrogation à distance .....	46
<b>10.</b>	<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>47</b>
<b>11.</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>50</b>
<b>12.</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE .....</b>	<b>51</b>
<b>13.</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>52</b>
<b>14.</b>	<b>DECLARATIONS .....</b>	<b>53</b>

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'A partir.
  - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
  - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure-) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'A partir d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et être immergé dans l'eau.
14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

## AVERTISSEMENT de la mise en place

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## 2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE

### 2.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- Station de base
- Combiné sans fil
- Adaptateur secteur
- Batterie rechargeable NiMH
- Cordon de ligne téléphonique
- Pendentif alarme
- Chargeur du pendentif
- Cordon avec clip de rupture
- Manuel de l'utilisateur

### 2.2 Emplacement

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit électrique que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de la station de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.


Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

## 2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural.

Faire passer les cordons dans les rainures.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

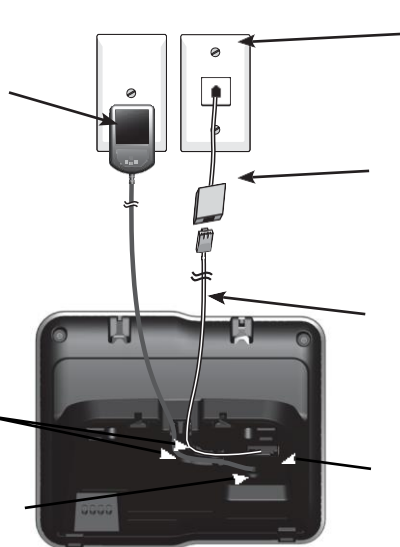

Branchez le cordon sur une prise téléphonique ou un filtre ADSL.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez l'Internet ADSL. Le filtre ADSL doit être branché sur la prise téléphonique murale.

Cordon de ligne.

Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans la prise de ligne à l'arrière de la base du téléphone.

### **REMARQUE**


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base.

## 2.4 Installer et charger la batterie du combiné

1. Branchez le connecteur de la batterie dans la prise du compartiment de la batterie du combiné. Insérez la batterie fournie comme indiqué.



2. Alignez le couvercle contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

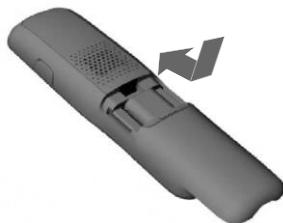

3. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est mis en charge dans le chargeur.



### REMARQUES

- Au premier démarrage, le téléphone vous demande **de choisir le langage** que vous désirez.
- Utilisez uniquement la Batterie rechargeable NiMH
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débrancher le et retirer la batterie pour éviter les éventuelles fuites de liquide.




## 2.5 Installer le pendentif

Branchez l'extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural.



# 3. CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

## 3.1 Vue d'ensemble du combiné

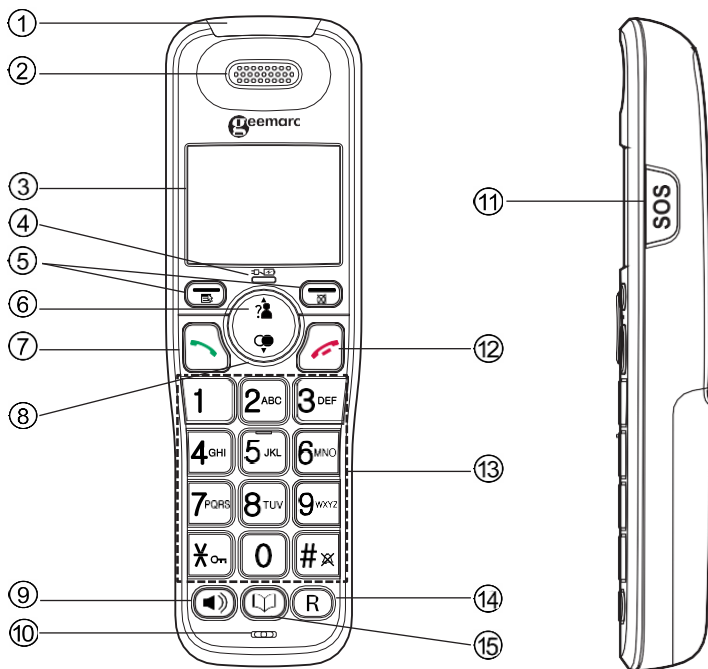

1. VOYANT DE SONNERIE/ VOLUME AMPLIFIÉ

2. ÉCOUTEUR

3. AFFICHAGE LCD

4. VOYANT DE CHARGE

Toujours allumé lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

5. TOUCHES DE FONCTION

**MENU/OK** (  )

En mode veille: Appuyez pour accéder au menu principal.

Dans le mode sous-menu: Appuyez pour confirmer la sélection.

Pendant un appel : Permet d'accéder à l'interphone/répertoire/liste d'appels.

## **INT/MUET/EFFACER**

Menu principal: Appuyez pour revenir à l'écran de veille.

Mode sous-menu: Appuyez pour revenir au menu précédent.

Mode sous-menu: Maintenez enfoncé pour revenir en veille. Mode

édition/pré-composition : supprimer un caractère/chiffre.

Mode d'édition/pré-composition : supprimer tous les caractères/chiffres.

Pendant un appel : Appuyez sur muet pour désactiver le micro. Ré appuyez sur la touche pour remettre le micro

Mode veille : Appuyez pour appeler un autre combiné.

## **6. HAUT/APPEL**

En mode veille: Appuyez pour accéder à la liste des appels entrants.

Menu: Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour défiler vers le haut.

Mode édition: déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Pendant un appel: Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

## **7. PARLER**

Mode veille/pré-composer : Appuyez pour effectuer un appel.

Répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour effectuer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode oreillette.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour répondre à un appel en mode écouteur.

## **8. LISTE VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION**

En mode veille: Appuyez pour accéder à la liste de recomposition.

Dans le menu: Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments de menu.

Dans le répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode d'édition : Appuyez dessus pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Pendant un appel : Appuyez dessus pour diminuer le volume d'écoute.

## **9. HAUT-PARLEUR**

En mode veille/pré-composer : Appuyez pour effectuer un appel en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer au mode écouteur.

Dans le répertoire/Liste de recomposition/appel : Appuyez pour effectuer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

Au cours de la sonnerie : Appuyez pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Appuyez à nouveau pour passer en mode écouteur.

## **10. MICROPHONE**

## 11. SOS

En mode veille : Maintenez enfoncé pendant une seconde pour lancer la séquence d'appel d'urgence de votre combiné.

Pendant la sonnerie d'alarme : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter la séquence d'appel d'urgence de votre combiné.

## 12. PARLER

Pendant un appel: Appuyez pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode menu/mode d'édition : Appuyez pour revenir au menu précédent.

En mode menu/mode d'édition: Maintenez enfoncé pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille : Appuyez et maintenez pour l'éteindre.

Appuyez et maintenez quand il est éteint pour l'allumer.

## 13. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE\* (↵), DIESE# (⌘)

Mode édition: Appuyez pour insérer un chiffre / caractère \*↵ / #⌘

La touche \*↵ en mode "veille» : Appuyez et maintenez pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

La touche #⌘ en mode "veille» : Appuyez et maintenez pour activer/désactiver la sonnerie.

La touche 0 en mode veille/pré-composer/numéro en mode édition: Maintenez enfoncé pour insérer une pause.

## 14.R


En mode menu/mode d'édition : Appuyez dessus pour insérer un flash.

Pendant un appel : Appuyez pour répondre à un nouvel appel si vous avez souscrit au service d'appel en attente de votre fournisseur de services.

## 15. REPERTOIRE TELEPHONIQUE

En mode veille : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

## 3.2 Vue d'ensemble de la Base à cordon

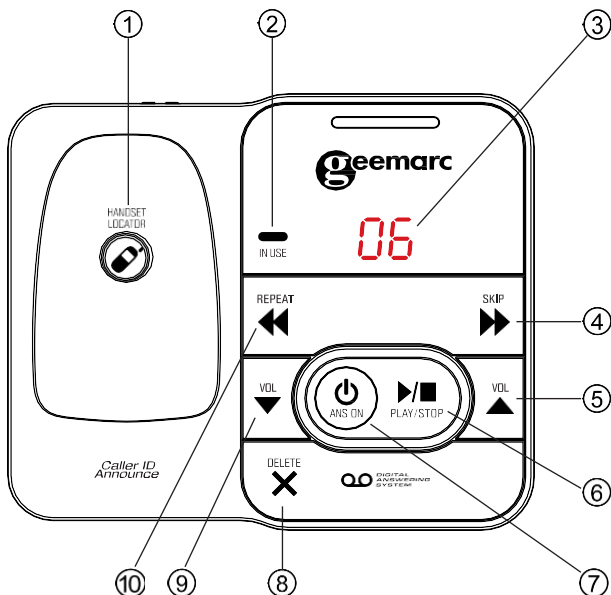

### 1. 🔍 /RECHERCHE DE COMBINE

Alors que le téléphone est en veille, appuyez pour mettre en recherche les combinés.

### 2. EN COURS D'A PARTIR

Clignote rapidement lorsqu'il y a un appel entrant.

Clignote Modérément pour indiquer que le combiné enregistre.

Clignote lentement quand un autre téléphone est utilisé.

### 3. Compteur de messages

Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.

### 4. ▶ /PASSER

Appuyez dessus pour passer au message suivant

### 5. VOL▲

Pendant la lecture du message, appuyez pour augmenter le volume d'écoute. En mode veille, appuyez dessus pour augmenter le volume de la sonnerie de base.

**6. ►/■/LECTURE/STOP**

Appuyez dessus pour démarrer ou arrêter la lecture du message.

**7. ⏻/REP EN MARCHE**

Appuyez pour activer le répondeur ou le désactiver.

**8. X/SUPPRIMER**

Appuyez pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez deux fois pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

**9. VOL ▼**

Pendant la lecture du message, appuyez pour diminuer le volume d'écoute.


En mode veille, appuyez pour diminuer le volume de sonnerie de la base.

**10. ◀/RÉPÉTER**

Appuyez pour répéter un message.

Appuyez deux fois pour lire le message précédent

### 3.3 Vue d'ensemble du pendentif

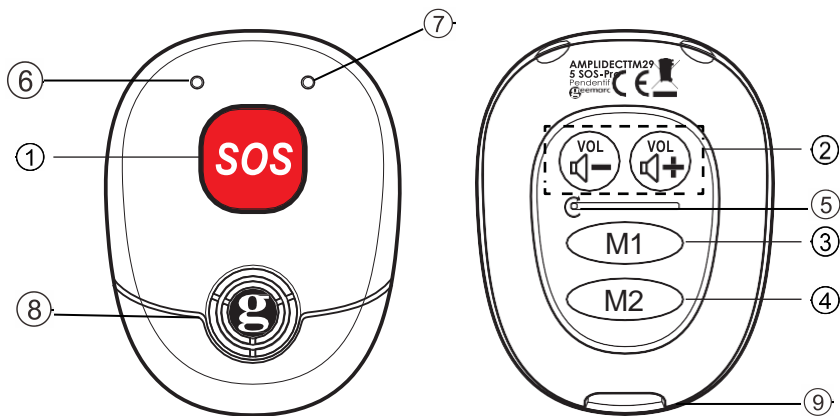

#### 1. SOS

En mode veille, appuyez pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence.

En mode appel : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour arrêter l'appel.

#### 2.

Appuyez pour régler le volume de la sonnerie du pendentif.

Appuyez et maintenez les deux touches pour entrer en mode enregistrement.

#### 3. M1

Appuyez pour composer le numéro stocké à l'emplacement **M1** du combiné.

#### 4. M2

Appuyez pour composer le numéro stocké à l'emplacement **M2** du combiné.

#### 5. REMISE À ZÉRO

#### 6. MICROPHONE

#### 7. Indicateur à LED

##### (Rose) :

- En continue : non associé,
- Clignotement lent : hors de portée.

##### (Bleu) :

- En continue sur socle signifie que la charge est pleine.
- En continue pendant 3 s avec émission d'un long bip: l'association est réussie.
- 2 clignotements: le pendentif est en ligne.
- Le pendentif est décroché et le signal est faible : Emission de 3 bips rapides toutes les 10 s.
- Clignotement lent : en mode veille hors chargeur

- Clignotement en continue : Emission Sonnerie.

**(Rouge)** : - En continue sur socle de charge : Mise en charge du pendentif.


- Clignotement long : la batterie est faible lorsque l'appareil est en cours d'A partir et des doubles bips courts sonores retentissent

**(Rouge/Bleu)** :

- - Basculer en mode association après avoir appuyé et maintenu les touches **Vol(+)** et **Vol(-)** pendant 10 s..

## 8. HAUT-PARLEUR

## 9. CONTACTS DU CHARGEUR

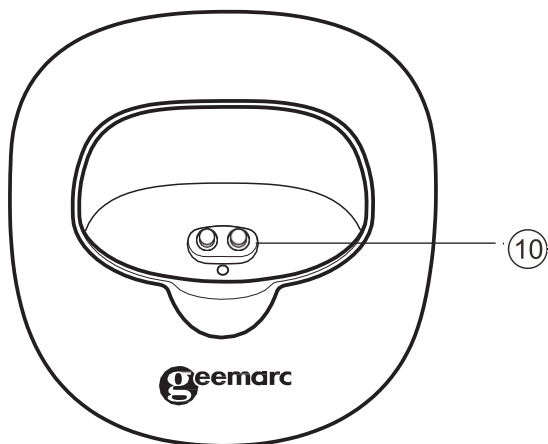






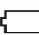






## 10. Socle de recharge



### 3.4 Symboles et icônes affichage LCD du combiné

L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.



	Présent quand le combiné est à portée de la base. Clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base..
	Présent quand un appel interphone est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel interne ou un appel interne est maintenu.
	Présent quand un appel est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en marche.
	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Clignote en cas de batterie faible détecté pour indiquer qu'il doit être rechargé
	Présent lorsque le répondeur téléphonique (RT) est allumé. Clignote lorsqu'un nouveau message est reçu dans le répondeur.
	Présent lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le clavier est verrouillé.
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent lorsqu'il y a davantage de chiffres existant avant le texte actuellement affiché.

<b>▶</b>	Présent quand les autres chiffres existant après le texte actuellement affiché.
<b>OK</b>	Appuyez pour confirmer la sélection en cours, si possible.
<b>★</b>	Présent quand il s'agit d'un nouveau appel (s) dans liste des appels.
<b>▲ ▼</b>	Défilement haut / bas les éléments de menu / annuaire / recomposer la liste / liste d'appels.
<b>C</b>	Appuyez pour effacer un caractère ou arrêter l'alarme, si possible, appuyez dessus pour désactiver / réactiver le son pendant un appel.

### 3.5 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la **touche gauche** va accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.



Menu	REPertoire	JOURNAL	REGL BASE	REGL COMB	MEM DIRECT
<b>Sous menu</b>	Examiner la liste du répertoire	Examiner la Liste d'appels	MELODIE BASE VOL SONNERIE ANNULER-COMB NUMEROTATION	SONNERIE ALERTE SON CHOIX BASE LANGUE NOM COMB AFFICHAGE REPONSE-AUTO	M1 M2 M3 M4
	Sous un contact:	Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :	DELAI R MODIF-PIN		
	AJOUTER	AJOUTER			
	VISIONNER	SUPPRIMER			
	MODIFIER	SUP -TOUT			
	SUPPRIMER	DETAILS			
	SUP -TOUT	TYPE APPEL			
	ETAT MEM				
	NUM RAPIDE				





REGLAGES SOS	DATE & HEURE	ALARME	ASSOCIER	DEFAULT	REPONDEUR
NUMERO SOS ANNONCE SOS LANGUE SOS	FORMAT DATE FORMAT HEURE REGL HEURE REGL DATE	ON OFF	BASE 1 BASE 2 BASE 3 BASE 4	CODE PIN?	LIRE MSG SUPPR-TOUT MEMO REP ON/OFF REGL REP MODE REP LANGUE REP ANNONCES NB SONNERIE TEMPS ENR COMPRESSION BS FILTRAGE CODE INT. MODIF PIN

### 3.6 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans le répertoire téléphonique ou renommez votre combiné.

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

#### Conseils de rédaction :

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause.
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par ▲/▼ pour modifier la sélection
3. Appuyez sur la **touche droite**  du combiné pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez la **touche droite**  du combiné pour supprimer la chaîne de texte.

#### 3.6.1 Caractères français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez	1er	2èm e	3èm e	4èm e	5èm e	6èm e	7èm e	8èm e	9èm e		10èm e
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	**	?	/	\	(	)						**
#	#	'	,	-	.	&						#







## 4. UTILISEZ VOTRE PENDENTIF

### 4.1 Appels d'urgence SOS

#### 4.1.1 Réglages SOS à partir du combiné

Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir faire des appels d'urgence SOS en utilisant le pendentif ou le combiné.

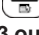**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲▼ pour sélectionner **REGLAGE SOS**.
2. Appuyez sur la **touche de gauche**  pour afficher **NUMERO SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲▼ pour sélectionner le numéro SOS à éditer (**SOS 1, 2 de SOS, SOS 3 ou SOS 4**).
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez un nouveau numéro ou modifier le numéro déjà enregistré.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer ou la **touche droite**  pour supprimer.

#### 4.1.2 Faire un appel d'urgence SOS

**A partir du pendentif :**

Appuyez sur la **touche SOS** du pendentif pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** vers le numéro **SOS 4** (3 Cycles). Un appel sera tout d'abord composé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, l'appel sera fait au numéro **SOS 2** et ainsi de suite.

**A partir du combiné :**

Appuyez et maintenez la **touche SOS** du combiné pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** vers le numéro **SOS 4**. Un appel sera tout d'abord composé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, l'appel sera fait au numéro **SOS 2** et ainsi de suite.

**Remarque :** L'autre partie lors de la réception de message SOS, doit valider l'appel en appuyant sur une touche. Puis toutes les 2 min il faut revalider pour poursuivre la conversation.






#### 4.1.3 Sélection du langage pour le message SOS

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲▼ pour choisir **REGLAGES SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲▼ pour choisir **LANGAGE SOS**. Choisir votre langage parmi les 3 (Français, Allemand ou Anglais)
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre langage SOS

#### 4.1.4 Enregistrement du Message SOS




Vous pouvez enregistrer votre message personnalisé SOS lorsque vous composez un appel d'urgence SOS.

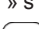**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGLAGES SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **ANNONCE SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENR MSG**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour lancer l'enregistrement du message SOS et le mot « Enregistrement » s'affiche.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre message SOS.

#### 4.1.5 Écouter le Message SOS

**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGLAGES SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCE SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour choisir **LIRE ANN**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour démarrer la lecture du message SOS.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour arrêter la lecture du message SOS.

### 4.2 Touches de mémoire directe

Vous pouvez stocker dans les mémoires directes (**M1 à M4**), les numéros dans le combiné. Ensuite, vous pouvez les composer directement depuis le mode veille en appuyant sur la touche M1/M2 du pendentif.

#### 4.2.1 Définir les touches de mémoire directe dans le combiné

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **MEM DIRECT**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir la mémoire d'édition (M1 à M4).
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez un nouveau numéro ou modifier le numéro déjà enregistré.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer.

#### 4.2.2 Faire des appels à l'aide des touches de mémoire directe

**A partir du pendentif :**

- Appuyez sur **M1** ou **M2** pour composer le numéro direct stocké en mémoire dans le combiné.

## 5. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

### 5.1 Passer un appel externe



#### 5.1.1 Numérotation préparatoire

##### A partir du combiné:

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur la **touche droite**  pour effacer l'entrée.





#### 5.1.2 Sélection directe

##### A partir du combiné:

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

#### 5.1.3 Appelez à partir du répertoire

##### A partir du combiné:







1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.
2. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

#### 5.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

##### A partir du combiné:








1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels.

**OU**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **JOURNAL**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner l'entrée de liste du journal souhaitée
4. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.

## 5.1.5 Appelez à partir de la liste des numéros bis

### A partir du combiné:

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur / pour sélectionner la direction désirée recomposer le numéro.
3. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée de liste sélectionné. Appuyez  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant .

## 5.1.6 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel soit terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).

## 5.2 Répondre à un appel

### A partir du combiné:

Si le combiné n'est pas sur la station de base:

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau sur  pour activer le haut-parleur.



Si le combiné est sur la station de base et la **réponse automatique** a été programmer: Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

## 5.3 Ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

### A partir du combiné :

#### Pendant un appel :

Appuyez sur / pour sélectionner entre **VOLUME 1** et **VOLUME 5**. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.



## 5.4 Volume Amplifié

Le volume amplifié est automatiquement activé lorsque vous modifiez le niveau de volume pour les **VOLUME 4** ou **5**. Cela vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

**A partir du combiné :**

**Pour activer la fonction volume amplifié :**


- Appuyez sur ▲ pour augmenter le volume pour le **VOLUME 4 - VOLUME 5** à tout moment pendant un appel. Le voyant volume Amplifié s'allume. Après environ 10 secondes, « BOOST ALLUME » s'affiche sur l'écran du combiné.

**Pour désactiver la fonction volume amplifié de l'écouteur :**

- Appuyez sur ▼ pour diminuer le volume à **VOLUME 1 - VOLUME 3** à tout moment pendant un appel. Le voyant volume amplifié s'éteindra. « BOOST ALLUME » va disparaître de l'écran du combiné.

## 5.5 Terminer un appel

**A partir du combiné :**

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel.

**OU**



Remplacez le combiné sur sa base pour terminer l'appel.

## 5.6 Mettre un appel en sourdine

Avec l'appel en sourdine, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.


**A partir du combiné :**


**Pendant un appel :**

Appuyez sur la **touche droite**  pour couper le micro et « MUET » sera afficher sur l'écran du combiné. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur la **touche droite**  pour réactiver le micro.

## 5.7 Mode silencieux du combiné

En mode veille, appuyez et maintenez **#**  pour éteindre la sonnerie du combiné.



 S'affichera sur l'écran du combiné.

En mode silencieux, appuyez et maintenez **#**  pour activer la sonnerie du combiné.

 Disparaîtra.

## 5.8 Verrouillage clavier du combiné sans fil

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage du clavier pour éviter de mauvaise opération.

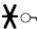En mode veille, appuyez et maintenez  pour activer le verrouillage. 

S'affichera sur l'écran du combiné.

En mode clavier verrouiller, appuyez et maintenez  pour désactiver le verrouillage.



## 5.9 Recomposition de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros appelés sur le combiné sans fil à la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro le plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de recomposition

### 5.9.1 Recomposer un numéro depuis la liste les numéros bis

**A partir du combiné :**

1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.

#### **REMARQUE:**

Si l'entrée de recomposition s'affiche avec le nom, appuyez sur # pour afficher le numéro.

2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de recomposition.

3. Appuyez sur  ou  pour recomposer le numéro.

#### **REMARQUE:**

S'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « Vide ».

### 5.9.2 Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire


1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 5.9.1.

2. Appuyez sur la **touche gauche**  pour sélectionner **AJOUTER**.

3. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le nom.

4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour stocker le numéro dans le répertoire.

5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour sélectionner la liste des mélodies.

6. Appuyez sur  pour parcourir la liste des mélodies. La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

7. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer.

### 5.9.3 Supprimer un numéro de rappel

1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 5.9.1.

2. Appuyez sur la **touche gauche**  et  pour choisir **SUPPRIMER**.

3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer.

## 5.9.4 Supprimer toute la liste de rappel


### A partir du combiné:




1. Suivez l'étape 1 et 2 de la section 5.9.1.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour reconfirmer.



## 5.10 Recherche du combiné ou du pendentif

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné ou le pendentif.

Vous pouvez localiser le combiné ou le pendentif de la station de base comme ci-dessous.

- En mode veille, appuyez sur  /**HANDSETLOCATOR**.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et « APPELER » Clignotera sur l'écran Vous pouvez arrêter l'appel en appuyant sur  /  /  /

**Touche droite**  sur n'importe quel combiné ou  /**HANDSETLOCATOR** sur la base pour arrêter l'appel. Pour l'alarme du pendentif, appuyez sur la touche SOS.

### REMARQUE:




S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone ou l'alarme du pendentif sonnera avec la mélodie de l'appel entrant.

## 5.11 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels de conférence. Si le combiné ou le pendentif appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

### 5.11.1 Intercom

#### A partir du combiné :

1. En mode veille, appuyez sur la **touche gauche**  et les numéros des dispositifs enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné ou le numéro du pendentif à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

### REMARQUE:

Si seulement 1 combiné sans fil est enregistré à la station de base, l'appel interne ne sera pas disponible.

Remarque:

Il n'est pas possible d'appeler avec le pendentif à un combiné.

## 5.11.2 Appeler tous les dispositifs






### A partir du combiné:

1. En mode veille, appuyez sur la **touche gauche** et les numéros des combinés enregistrés ou pendentifs s'afficheront sauf le combiné appelant.
2. Appuyez sur 9 pour faire sonner tous les combinés et pendentifs enregistrés.

## 5.11.3 Transférer un appel externe

### A partir du combiné:

#### Pendant un appel externe:


1. Appuyez sur la **touche gauche**  et sélectionnez **INTERCOM**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et sélectionner le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le dispositif appelé sonne.
4. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur , le combiné appelant ou replacez le combiné appelant sur son socle de charge pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

## 5.11.4 Faire un appel de conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné sans fil et le dispositif d'alarme. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

### A partir du combiné sans fil :

#### Appel externe:

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 5.11.3.
2. Appuyez et maintenez  du combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

#### **REMARQUE:**

Toute partie (dispositif d'alarme ou sans fil) raccroché au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie toujours en communication.

## 6 REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base du téléphone avec noms et numéros. Chaque contact peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour vos contacts téléphoniques. Les contacts sont stockés dans l'ordre alphabétique par nom.

### 6.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

**A partir du combiné sans fil : En mode Veille :**

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPERTOIRE** puis appuyez **touche gauche**  pour accéder à liste du répertoire.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le nom.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le numéro.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour votre nouvelle entrée.
6. Appuyez sur la **touche gauche**  pour stocker le nouveau contact.







### 6.2 Recherche d'un contact téléphonique

**A partir du combiné : En mode Veille :**

1. Accéder à la liste du répertoire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs fois.









### 6.3 Afficher un contact téléphonique

**A partir du combiné : En mode veille :**

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPERTOIRE** et appuyez **touche gauche**  pour accéder à liste du répertoire.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **EDITER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour rechercher le nom, le numéro et la mélodie du contact.
5. Appuyez sur  pour appeler le contact ou  pour revenir en veille.

## 6.4 Modifier un contact du répertoire

A partir du combiné : En veille :

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPertoire** puis appuyez **touche gauche**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIFIER**.
4. Appuyez **touche gauche**  et le contenu du contact s'affiche. Appuyez **touche droite**  pour effacer un caractère ou un nombre.
5. Modifiez le nom et appuyez sur la **touche gauche** .
6. Modifier le numéro, puis appuyez sur la **touche gauche** .
7. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer le réglage.






## 6.5 Supprimer un contact

A partir du combiné : En veille :

1. Appuyez **touche gauche**  pour **REPertoire** puis appuyez **touche gauche**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer.

## 6.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire





A partir du combiné : En veille :

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez **touche gauche**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.
4. Appuyez **touche gauche**  pour reconfirmer.

## 6.7 Etat du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisé dans votre téléphone et combien d'entrées d'annuaire sont disponibles pour stocker dans le répertoire téléphonique.

**A partir du combiné:**





1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez **touche gauche**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **CAPACITE**. L'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées dans le répertoire téléphonique).
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## 6.8 Définir les numéros de numérotation rapide


Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

### 6.8.1 Ajouter ou modifier une touche de numérotation rapide




**A partir du combiné:**

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez sur la **touche gauche**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUM RAPIDE**.
3. Appuyez ▲/▼ et **touche gauche**  pour sélectionner entre la touche 2 et 9.

S'il n'y a aucun numéro stocké dans la touche sélectionnée:



4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une entrée dans la liste de contact téléphonique.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

Ou s'il existe déjà un certain nombre stocké dans la touche sélectionnée:

1. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner **MODIFIER**.
2. Appuyez **touche gauche**  pour sélectionner une entrée du répertoire.
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 6.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

**A partir du combiné:**

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 6.8.1.
2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner une entrée dans la liste de l'annuaire téléphonique.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## 7 AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur de services réseau. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné et la base des informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire téléphonique, enregistré dans le Répertoire, le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à ce contact téléphonique.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « PRIVE » s'affichera.

Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « INDISPONIBLE » s'affichera.

En mode veille, si trois derniers appels ont été reçus, « 3 NV APPELS » sera affiché.





### 7.1 Afficher le journal d'appel

Les appels sans réponse sont enregistrés dans le journal d'appels avec le tout dernier appel en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé. L'appel sans réponse, qui n'a pas été lu est marqué avec★.

**A partir du combiné :**










1. Appuyez  pour accéder à la liste d'appels.

**OU**

1. Appuyez **touche gauche** et /  pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez **touche gauche** et /  pour voir l'entrée de liste d'appel souhaitée.

### 7.2 Enregistrer un numéro de la liste d'appel dans le répertoire

**A partir du combiné :**

1. Suivez la Section 7.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **touche gauche**  et /  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez **touche gauche**  et entrez le nom.
4. Appuyez **touche de gauche**  et sélectionné le numéro d'appel, la liste s'affichera.
5. Modifier le numéro si nécessaire.
6. Appuyez **touche gauche**  et /  pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.






## 7.3 Supprimer une entrée dans le journal des appels

### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 7.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **touche gauche** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez **touche gauche** pour confirmer.

## 7.4 Supprimer toute la liste de rappel

### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.
4. Appuyez **touche gauche**  pour reconfirmer.




# 8 REGLAGES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.




## 8.1 Paramètres de l'horloge

Vous aurez besoin définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages du répondeur ou appelez des entrées de la liste.





### 8.1.1 Format de Date

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **touche gauche**  pour afficher le **FORMAT DATE**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).
4. Appuyez **touche gauche** pour confirmer.

### 8.1.2 Définir le Format de l'heure

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le **FORMAT HRS**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre format de l'heure désirée (12h ou 24h).
4. Appuyez **touche gauche** pour confirmer.





### 8.1.3 Régler l'heure

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL HEURE**.
3. Appuyez **touche gauche**  et entrez les informations de l'heure. L'heure est entré sera dans le format que vous définissez dans la section 8.1.2.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

#### **REMARQUE:**

Si le temps a déjà été effectué, l'heure actuelle s'affiche, dans le cas contraire, « HH-MM » s'affichera.


### 8.1.4 Régler la Date

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir la **REGL DATE**.
3. Appuyez **touche gauche**  et entrez les informations de date. La date d'entrée sera dans le format que vous définissez dans la section 8.1.1.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.


#### **REMARQUE:**

Si la date a été fixée à l'avant, la date du jour s'affiche, dans le cas contraire, « JJ--MM--AA » s'affichera.

## 8.2 Réglages de l'alarme

Vous pouvez utiliser ce téléphone sans fil comme alarme. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte et « l'Alarme ON », la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour stopper l'alarme. Si la fonction snooze est activée, l'alarme se déclenche à nouveau à la fin de la période de répétition de sept minutes.

### REMARQUE:

- L'appuie sur une touche est toujours applicable, si le clavier du combiné est verrouillé et quand l'heure de réveil programmée.
- Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **OFF**, l'alarme sonne toujours à **VOLUME 1**.
- Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, « l'Alarme ON » clignote toujours. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte. Une fois que l'utilisateur appuie sur une touche ou appuie sur  et maintient pour désactiver l'alarme, il reviendra à l'écran de durée d'appel.
- Lors de la pagination et la sonnerie, l'alarme ne se déclenche pas lorsque l'heure de réveil programmée est atteinte. Toutefois, si la fonction snooze est activée, l'alarme retentit à nouveau à la fin de la période de répétition.




### 8.2.1 Activer/désactiver l'alarme

- Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner par **ALARME**.
- Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### REMARQUE:

Si ON est sélectionné, vous êtes invité à définir l'heure de l'alarme.





### 8.2.2 Régler l'alarme (si l'alarme est définie pour fonctionner)

- Suivez les étapes 1 à 3 à l'article 8.2.1.
- Entrez l'heure de l'alarme.
- Appuyez **touche gauche** . Vous aurez à définir la fonction snooze.
- Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## 8.3 Réglages du combiné

### 8.3.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est fourni pour votre choix.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN INT.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels internes.





#### REMARQUE:

La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **touche gauche** pour confirmer.

### 8.3.2 Régler la sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est fourni pour votre choix.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN EXT.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.





#### REMARQUE:

La mélodie respective jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.



5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.3 Régler le Volume de la sonnerie

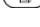Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le **VOL SONNERIE** de la sonnerie.
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

#### REMARQUE:

- Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.
  - Si OFF est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.





### 8.3.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **ALERTE SON.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE/ BATT FAIBLE/ HORS PORTEE**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.5 Sélectionnez la Base

Si vous avez enregistré le combiné à plus d'une base, vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux à utiliser avec votre appareil.






1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir sélectionner **CHOIX BASE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner la base désirée avec lequel votre appareil fonctionne.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.6 Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 6 langues Anglais, Français, Néerlandais, Italien, Allemand et Espanol.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **LANGUE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.7 Renommez le combiné

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **NOM COMB.**  
Appuyez **touche gauche**  et entrez le nom de votre appareil. Appuyez **Touche droite**  pour effacer un caractère.
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.8 Choisissez les données à afficher en mode veille

Vous pouvez choisir d'afficher le nom du combiné ou l'heure sur votre écran de veille.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le nom du combiné ou temps.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.3.9 Définir la réponse Auto





Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de la base sans appuyer sur une touche quelconque.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGE COMB.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONSE AUTO.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## 8.4 Réglages de la base par le combiné sans fil





### 8.4.1 Régler la mélodie de sonnerie de la base

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies est disponible.


1. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez **MELODIE BASE**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez la mélodie de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.4.2 VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.






1. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez **VOL SONNERIE**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▼/▲ pour sélectionnez le volume de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.4.3 Dés-enregistrer le combiné

Il vous est demandé d'entrer le code PIN de 4 chiffres pour dés-enregistrer le combiné de la base. Le  du combiné dés-enregistré sera éteint.





#### **REMARQUE:**

Vous ne pouvez pas dés-enregistrer le combiné que vous utilisez actuellement.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ANNULER COMB**.
3. Appuyez **touche gauche**  et il vous sera demandé d'entrer le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut).
4. Entrer le code PIN à 4 chiffres.
5. Appuyez **touche gauche**  et la liste des dispositifs enregistrés s'affichera.
6. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des appareils que vous souhaitez désinscrire.
7. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.



### 8.4.4 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéale pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUMEROTATION**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre mode de numérotation (FREQ VOCALE/ DECIMALE).
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.






### 8.4.5 Régler le temps du Flash

Le temps de flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **DELAI R**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre temps flash désiré (COURT= 100 MS, MEDIUM(France) = 300MS, LONG = 600 MS).
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 8.4.6 Changer le Code PIN du système

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la station de base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre tout piratage de ligne. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN**.
3. Appuyer **touche gauche**  2 fois et entrer le code PIN à 4 chiffres.
4. Entrer l'ancien code PIN (par défaut 0000).
5. Appuyez **touche gauche**  2 fois et entrez le nouveau code PIN.
6. Appuyez **touche gauche**  2 fois et entrez le nouveau code PIN à nouveau.

#### REMARQUE:

Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas avec le nouveau code PIN entré à l'étape 5, l'utilisateur est invité à entrer à nouveau le bon code PIN de l'étape 5.

7. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer le réglage.



## 8.5 Enregistrement

Votre combiné et le dispositif d'alarme sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à une station de base.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré à la station de base (Y clignote même lorsque le combiné est proche de la station de base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

### Combiné sans fil





1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ASSOCIER**.
2. Si vous avez plus d'une base, appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro de la base de BASE 1, BASE 2, BASE 3 et BASE 4. Il y aura ✕ derrière la base enregistré.
3. Appuyez **touche gauche**  pour afficher « PIN? », entrer dans le code PIN à 4 chiffres pour la base (le code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez **touche gauche**  et l'affichage indiquera « EN ATTENTE ».
5. En même temps, maintenez enfoncée  / **HANDSET LOCATOR** sur la base pour passer en mode enregistrement.

Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera au mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".

## 8.6 Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appel entrées de la liste seront supprimées, mais votre répertoire téléphonique reste inchangé

**A partir du combiné sans fil :**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner DEFAULT.
2. Appuyer **touche gauche**  et entrer le code PIN à 4 chiffres.  
le code PIN par défaut est 0000.
3. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.
4. Appuyez **touche gauche**  pour reconfirmer.

## 9 REGLAGES REPONDEUR

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans le délai d'enregistrement maximal d'environ 15 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs de votre téléphone.

### 9.1 Répondeur commutation marche/arrêt

A partir du combiné :

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP ON/OFF**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.




À partir de la touche de la base :

Vous pouvez activer / désactiver la fonction REP en appuyant sur /ANS ON.

### 9.2 Écouter les Messages du Répondeur



Si vous avez des nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « MSGS 02/05 », ce qui signifie que vous avez 2 nouveaux messages pour un total de 5 messages. Les nouveaux messages sont joués en premiers et puis sont enregistrés.

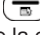A partir du combiné:

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  pour afficher **LIRE MSG**.
3. Appuyez **touche gauche**  encore une fois pour lancer l'écoute du message et l'écran affiche la date du message reçu.
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture de message respectivement.

#### REMARQUE:

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf si il est supprimée.

5. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT, STOP, SUIVANT** ou **SUPPRIMER** pour effectuer les tâches suivantes pendant la lecture du message.
  - **STOP** : Arrêter l'écoute du message actuel et revenir au. Menu du répondeur.
  - **SUIVANT** : Pour passer l'écoute au message suivant L'indication de la date du message suivant s'affiche s'il y a un message suivant.
  - **PRECEDENT** : Pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. L'indication de la date du message en cours s'affiche.
  - **SUPPRIMER** : Pour supprimer le message actuel et le prochain message sera enclenché.
6. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.





- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message.
- Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. Appuyez sur **4** deux fois pour revenir au message précédent.
- Appuyez sur **6** pour écouter le prochain message.
- Appuyez sur **2** pour supprimer l'écoute du message actuel.
- Appuyez sur **▲/▼** pour régler le volume de lecture.
- Appuyez sur **🔊/🔇** pour activer le haut-parleur ou le désactiver.

## À partir de la touche de la base : En veille :

1. Appuyez sur **▶/■/PLAY/STOP** pour écouter les messages et les mémos.
2. Si vous souhaitez arrêter la lecture, appuyez sur **▶/■/PLAY/STOP**.
3. Appuyez une fois sur **◀◀/REPEAT** si vous voulez répéter le message en cours depuis le début, ou appuyez deux fois pour sauter vers le message précédent pendant la lecture du message.
4. Appuyez sur **▶▶/SKIP** si vous voulez passer au message suivant pendant la lecture du message.
5. Appuyez sur **X/DELETE** si vous voulez supprimer le message en cours de lecture.

## 9.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

### A partir du combiné :

1. Appuyez **touche gauche**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **touche gauche**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **touche gauche** .
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer supprimer tous les anciens messages.





### REMARQUE:

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leur lecture.


## 9.4 Enregistrement d'un mémo

Vous pouvez enregistrer un message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera comme nouveau message pour être enclenché de la même manière qu'un message du répondeur. L'enregistrement d'un MEMO peut fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

### A partir du combiné :

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez **touche gauche**  pour démarrer le mémo d'enregistrement et « ENREGISTREMENT » s'affiche.
4. Appuyez **touche gauche**  pour arrêter l'enregistrement et enregistrer le mémo.

### OU

Appuyez **touche droite**  pour arrêter l'enregistrement de memo sans enregistrer les modifications et retourner au menu du répondeur.

## 9.5 Réglages du répondeur

### 9.5.1 Définir le Mode de réponse

Par défaut, le répondeur est défini en mode REP & ENREG qui permet aux appelants de laisser un message. Ce mode peut être changé sur REP SIMPLE qui n'autorise pas les appelants à laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants seront demandés à vous rappeler plus tard.

Vous pouvez sélectionner REP&ENREG ou REP SIMPLE pour le répondeur.









### A partir du combiné :

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP**.
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le **MODE REP**.
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SEUL**.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.5.2 Enregistrement de l'annonce de votre répondeur








Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour le mode enregistreur ou simple. Lorsque vous enregistrez votre propre Annonce, elle sert quand le répondeur prend l'appel. Si vos annonces personnalisées sont supprimé, l'annonce par défaut est restaurée automatiquement

**A partir du combiné :**


1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDUEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SEUL.**
5. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENR MSG.**
6. Appuyez **touche gauche**  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisée et « ENREGISTRE » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez **touche gauche**  pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisée. Votre annonce nouvellement enregistrée s'enclenchera automatiquement. Alternativement, appuyez **touche droite**  pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

### 9.5.3 Lecture de l'annonce sortante

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDUEUR.**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ANNONCES.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SEUL.**
5. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **LIRE ANN.**
6. Appuyez **touche gauche**  pour jouer votre annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant) et « LECT ANN » s'affichera à l'écran.
7. Appuyez **touche gauche**  pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.

**À partir de la touche de la base :**


Appuyez sur /REPEAT brièvement pour écouter votre annonce en fonctionnement (REP& ENREG ou REP SIMPLE).

#### **REMARQUE :**

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistré avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

## 9.5.4 Supprimer une annonce personnalisée

A partir du combiné sans fil :

1. Répétez les étapes 1 à 6 dans la section de lecture de l'annonce.
2. Appuyez sur  pour supprimer votre annonce personnalisée et revenir au menu précédent et l'annonce par défaut est automatiquement rétablie.

**REMARQUE :**






Si l'annonce par défaut est en cours de lecture, il est impossible de la supprimer.

## 9.5.5 Définir le Mode de réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à huit sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6<sup>ème</sup> sonnerie, jusqu'au premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.




**A partir du combiné :**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **NB SONNERIE (2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES ou MODE ECO).**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre délai de réponse souhaité.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

## 9.5.6 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant



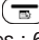


Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages.

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **TPS ENREG**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir le temps d'enregistrement désiré (Options disponibles : 60s, 120s, 180s ou ILLIMITE).
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.5.7 Définir le langage du répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur parmi 3 langues (Français, Deutsch et English).

1. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez sur  et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur  pour confirmer

### 9.5.8 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement




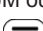

**A partir du combiné :**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.5.9 Modifier le taux de Compression

Trois taux de compression différent (HAUTE, MEDIUM et BASSE) sont fournis pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité d'enregistrement de vos messages. Plus bas est le taux de compression, plus la durée d'enregistrement est longue, plus haut est le niveau de qualité d'enregistrement, plus court est la durée d'enregistrement total.

**A partir du combiné :**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir la **COMPRESSION**  
Options : HAUTE, MEDIUM ou BASSE).
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.









## 9.5.10 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Le code PIN à 4 chiffres empêche d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.

### 9.5.10.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez **touche gauche**  deux fois pour composer l'ancien code PIN (le code par défaut est 0000)).
5. Appuyez **touche gauche**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.
6. Appuyez **touche gauche**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.






#### **REMARQUE:**

Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas avec le nouveau code PIN entré à l'étape 5, l'utilisateur est invité à entrer à nouveau le bon code PIN de l'étape 5.

7. Appuyez **touche gauche** pour reconfirmer.

### 9.5.10.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **CODE INT.**
4. Appuyez **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.5.10.3 opérations à distance

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur automatique et d'écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone.

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à parler à l'OGM, appuyer ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touches	Fonction	
	Pendant que le message n'est pas en marche.	Pendant que le message est en marche.
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
8		Arrêter la lecture du message
9	Désactiver le répondeur	
**	Entrer le code à 4 chiffres PIN	

#### REMARQUE :

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et le mode de réponse est en REP ENR, le mode de réponse va changer REP SIMPLE automatiquement. Il va changer en mode REP ENR automatiquement après que quelques messages soient supprimés.

## 10. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
<b>Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.</li><li>• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base</li><li>• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.</li><li>• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.</li><li>• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronise.</li><li>• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.</li><li>• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.</li></ul>
<b>Batterie faible montré à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placez le combiné sur son socle pour le recharger.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, puis recharger le combiné sur son socle.</li><li>• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez la batterie.</li></ul>
<b>La batterie ne se charge pas dans le combiné ou la batterie du combiné n'acceptent pas la charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie, puis chargez jusqu'à 16 heures.</li><li>• Acheter une nouvelle batterie.</li></ul>

**Il y a interférence lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.**

- Le combiné peut être hors de portée. Déplacez le plus près de la base téléphonique.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.
- Appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences
- Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants : sans fil routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres...
- Si votre téléphone est connecté à un modem ou un parafoudre, branchez le téléphone (ou le modem/parafoudre) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou le modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parafoudre différents.
- L'emplacement de votre base téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, l'élévation de la base téléphonique améliore les performances globales.
- Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone filaire. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.
- Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).
- Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou dans les services du téléphone.

<b>Traitement commun pour équipements électroniques.</b>	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Couper le courant à la base du téléphone.</li><li>• Déconnecter la batterie du combiné.</li><li>• Attendez quelques minutes avant de brancher l'alimentation à la base du téléphone.</li><li>• Réinstaller la pile et replacez le combiné sur la base du téléphone.</li><li>• Attendez que le combiné synchroniser avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.</li></ul>
--	--

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitée lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX.

Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.

# 11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Distance d'utilisation du combiné	Intérieur : 50m à l'extérieur : 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps de veille : 100 Heures env. Temps de conversation : 10 heures
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9 GHz
Nombre de canaux	10
Bloc d'alimentation	
La base	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie 6V DC/450mA
Chargeur du pendentif	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie 6V DC/450mA
Combiné	Batterie rechargeable 2.4V/500mAH

# 12. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

## Prendre soin de votre téléphone

- Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez traiter avec soin.
- Éviter tout traitement rugueux.
- Placez le combiné vers le bas doucement.
- Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin de le réexpédier.

## Éviter l'eau

- Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, une baignoire ou une douche.

## Orages électriques

- Des orages électriques peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils électriques pendant les orages.

## Nettoyage de votre téléphone

- Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage.

## REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisés lorsque vous êtes debout dans l'eau ou mouillé. Si la base téléphonique devrait tomber dans l'eau, **ne pas UTILISER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET LE CORDON DE LIGNE DE LA BASE OU LE CORDON MURAL**. Puis tirez l'unité par les câbles débranchés.

**MISE EN GARDE**  
**RISQUE D'EXPLOSION DE LA BATTERIE SI**  
**ELLE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE**  
**INCORRECT.**

**JETEZ LA BATTERIE USAGÉE**  
**CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

## 13 GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

**CE DÉCLARATION :** Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications, en particulier à l'article 3, sections 1a, 1b et section 2. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Branchement électrique :** l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**Branchement du téléphone :** les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN60950.



# CE 14 DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone 0328587599  
ou fax 0328587576



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



UG DECT295SOS\_PRO\_Fr\_v0.1

**geemarc™** United Kingdom  
Telecom SA  
5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc™** FRANCE  
Telecom SA  
Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
Tél.service après vente :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)