




- D** Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren
 - GB** Activate Bluetooth® in the smartphone settings
 - F** Activez le Bluetooth® dans les paramètres du Smartphone
 - E** Activar Bluetooth® en los ajustes del smartphone
 - I** Attivare il Bluetooth® nelle impostazioni dello smartphone



- D** App starten und den Anweisungen folgen
 - GB** Start the app and follow the instructions
 - F** Démarrez l'application et suivre les instructions
 - E** Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones
 - I** Avviare la app e seguire le istruzioni



- D** "Beurer HealthManager" aus dem App Store installieren
 - GB** Install "Beurer HealthManager" from the App Store
 - F** Installer « Beurer HealthManager » depuis la boutique d'applications
 - E** Instale "Beurer HealthManager" desde el App Store
 - I** Installare "Beurer HealthManager" dall'App Store

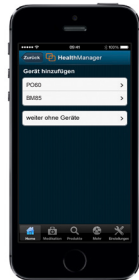

- D** PO 60 in App auswählen
 - GB** Select PO 60 in the app
 - F** Sélectionnez PO 60 dans l'application
 - E** Seleccionar en la aplicación PO 60
 - I** Nella app selezionare PO 60

- i** Bluetooth® ist immer standardmäßig in den Einstellungen des PO 60 aktiviert. Sobald eine Verbindung mit dem Smartphone besteht, werden Datum und Uhrzeit automatisch synchronisiert.
- GB** Bluetooth® is always activated as standard in the PO 60 settings. Once there is a connection to the smartphone, the date and time are synchronised automatically.



- D** Batterien einlegen
 - GB** Insert the batteries
 - F** Insérez les piles
 - E** Coloque las pilas
 - I** Inserire le batterie



- D** Um Daten mit Ihrem Smartphone zu synchronisieren halten Sie die ON/OFF-Taste 5 Sekunden gedrückt. Sobald eine Verbindung besteht, hört „SYNC“ auf zu blinken.
 - GB** To synchronise data with your smartphone, press and hold the ON/OFF button for 5 seconds. "SYNC" stops flashing as soon as a connection is established.

- F** La fonction Bluetooth® est toujours activée par défaut dans les réglages du PO 60. Dès qu'une connexion est établie avec le smartphone, la date et l'heure sont synchronisées automatiquement.
- E** Bluetooth® siempre está activado en los ajustes del PO 60 de manera estándar. Tan pronto se ha establecido una conexión con el smartphone, se sincronizan automáticamente la fecha y la hora.
- I** Il Bluetooth® è sempre attivo di default nelle impostazioni del PO 60. Non appena viene stabilita la connessione con lo smartphone, la data e l'ora sono sincronizzate automaticamente.

- F** Pour synchroniser les données avec votre smartphone, maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant 5 secondes. Dès que la connexion est établie, « SYNC » cesse de clignoter.
- E** Para sincronizar datos con el smartphone, mantenga pulsada la tecla ON/OFF durante 5 segundos. Tan pronto se ha establecido una conexión, "SYNC" deja de parpadear.
- I** Per sincronizzare i dati con il proprio smartphone, tenere premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi. Non appena la connessione viene stabilita, "SYNC" smette di lampeggiare.

- D** Alle Messdaten im Speicher werden automatisch an die App übertragen. Anschließend schaltet sich das Gerät automatisch aus.
 - GB** All measurement data in the memory is automatically transferred to the app. The device will then switch off automatically.
 - F** Toutes les mesures en mémoire sont transférées automatiquement sur l'application. Enfin, l'appareil s'éteint automatiquement.
 - E** Tutti i dati in memoria vengono trasmessi automaticamente all'app. Infine l'apparecchio si spegne automaticamente.
 - I** Tutti i dati in memoria vengono trasmessi automaticamente all'app. Infine l'apparecchio si spegne automaticamente.

Service Hotline
+49 (0) 731 / 39 89 - 144

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com
kd@beurer.de



Liste der unterstützten Smartphones/Tablets
List of supported smartphones/tablets

