


COUSSINS POLYFORM® MIXTE P314C & DUOFORM® P341C




POLYFORM® MIXTE P314C

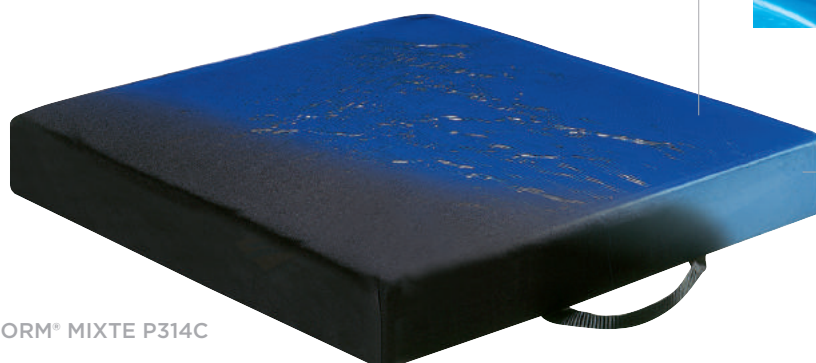

Gel viscoélastique

40 kg/m³

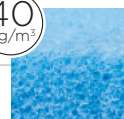


Mousse haute résilience

Gel viscoélastique multiportance



40 kg/m³

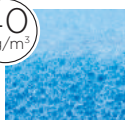

Mousse haute résilience



DUOFORM® P341C

► DESCRIPTIF

Coussins moulés composés de gel viscoélastique et de mousse haute résilience 40 kg/m³

► INDICATIONS

Catégorie d'indications 1

Coussin de prévention pour patients à **RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles).


Critères d'exclusion : antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, asymétrie d'appui (frontal ou sagittal), amputé vasculaire.



LPP : Classe 1B

Conditions de prise en charge : se référer au Guide de la prescription et à ameli.fr


► MODÈLES DISPONIBLES

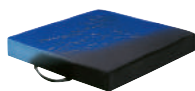

POLYFORM® Mixte P314C



DUOFORM® P341C

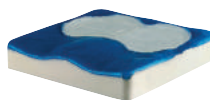

DUOFORM® P341C Soft pour patients < 70 kg

| MODÈLE | REF + | TERMINAISON REF. (versions disponibles) | | | | | | min - MAX |
|-----------------------|---------------|---|-----|-----|-------|-------|------|-------------|
| | | 2HW | 1HW | 1HF | | | | |
| POLYFORM® Mixte P314C | P314C4040... | ● | ● | ● | 40 cm | 40 cm | 6 cm | 30 - 90 kg |
| | P314C4543... | ● | ● | ● | 45 cm | 43 cm | 6 cm | 40 - 120 kg |
| | P341C3636... | ● | ● | | 36 cm | 36 cm | 8 cm | 30 - 70 kg |
| | P341C4242... | ● | ● | ● | 42 cm | 42 cm | 8 cm | 40 - 110 kg |
| DUOFORM® P341C | P341C4246... | ● | ● | | 42 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 120 kg |
| | P341C4542... | ● | ● | ● | 45 cm | 42 cm | 8 cm | 40 - 120 kg |
| | P341C4546... | ● | ● | ● | 45 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 140 kg |
| | P341C5146... | ● | ● | ● | 51 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 160 kg |
| DUOFORM® P341C Soft | P341CS4242... | ● | ● | | 42 cm | 42 cm | 8 cm | 30 - 70 kg |

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le **marquage CE**.

• Dans le cadre spécifique de la prise en charge par l'Assurance Maladie, les caractéristiques des poids minimum et maximum peuvent être considérées différemment.




GARANTIE **2** ANS



NF EN ISO 597 - 1 & 2



Entretien housses POLYMAILLE®



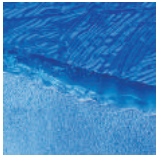


UNE COMBINAISON GEL ET MOUSSE INNOVANTE

- L'adjonction d'une base mousse traduit une efficacité en répartition des pressions par augmentation de la surface d'appui, grâce à un meilleur enfoncement des saillies osseuses.
- Gel viscoélastique à forte réticulation pour une prévention du phénomène de poinçonnement supérieure aux gels fluides.
- Une base en mousse HR haute densité conférant souplesse et confort au patient.
- Moulées ensemble, ces 2 strates de matières sont totalement solidaires l'une de l'autre (ne bougent pas dans la housse).

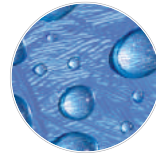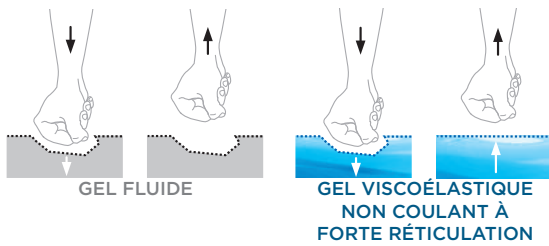


SURFACE 100% IMPERMÉABLE.

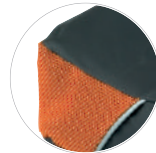

HOUSSE IMPER-RESPIRANTE

- (impermeabilisée et perméable à la transpiration)
- Adaptée à l'incontinence.
- Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.

SPÉCIFICITÉS DU DUOFORM® P341C

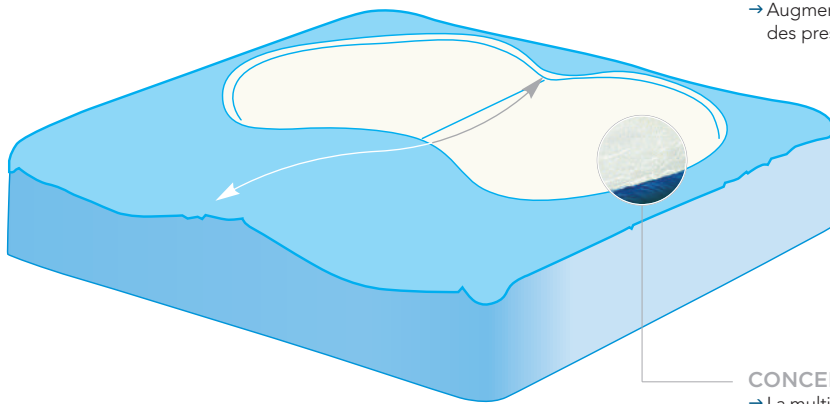

FORME ANATOMIQUE

- Améliore le positionnement, la stabilité ainsi que le confort.
- Augmentation de la surface de contact permettant ainsi une meilleure répartition des pressions.

CONCEPT MULTIORTANCE


- La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

ZONE BLANCHE :

Gel fluide nouvelle génération à mémoire élastique de faible portance garantissant une prévention accrue des zones à risques (ischions, sacrum).

ZONE BLEUE :

Gel viscoélastique de portance élevée pour les parties du corps présentant un risque moindre garantissant stabilité et confort.

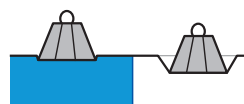

2 VERSIONS DE HOUSSES DISPONIBLES Plus d'infos p. 51



Avec housse(s) POLYMAILLE®

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Face inférieure anti-dérapante
- **REF** se terminant par **2HW** : coussin livré avec 2 housses
- **REF** se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse



Avec housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE® HD

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Cousue et soudée, spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités
- **REF** se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse

