

548 AN



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**

Code article : **1040016S01**

Code GTIN : 3615800006878

Autre coloris :

Code article : **1040016**

Code ACL : 3401029528808

Code GTIN : 3615800001446

Famille :

Canne tripode et quadripode

Description :

Canne quadripode, petite embase haut de canne anglaise, finition époxy gris pastel

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :

1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 690 mm
- Hauteur* maxi : 915 mm
- Embase : 230 x 180 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 30 mm

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 6 positions de réglage
- Rallonge : tube alu 22.5x1mm - Finition époxy – 2 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite.
- Blocage position de réglage : par clip
- Bague anti jeu
- Embout anti-bruit
- Haut de canne anglaise Sofia
- 4 embouts 19x40 noir

Poids du produit :

1,25 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Juin 2014

Version mise sur le marché : janv 2018

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



548 AN



Liste des pièces :

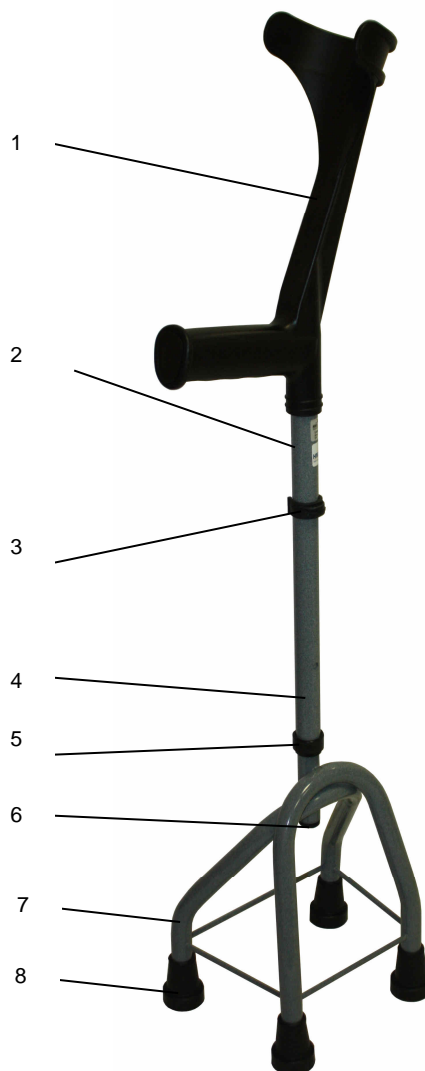

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102032	1	Haut de Sofia
2	A000134	1	Embout anti bruit
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	E104019	1	Rallonge alu quadripode AN
5	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
6	A000081	1	Embout diam. 20 EAZ noir
7	E104020	1	Embase 548 AN
8	A000218	4	Embout 19x40 noir

Edition 3 – janv 2018



Siège social : Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé
59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212
24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07