


NUMÉRO IDENTIFIANT DU CONTENEUR

# Conteneurs en plastique type 3H2 pour Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 3291

Conformes aux normes en vigueur NF EN ISO 23907:2012 et NF X30-511:2015

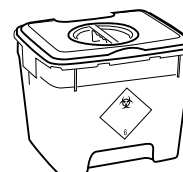

# Pacazur®

## FÛTS POUR DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX

Fabriqués en polypropylène de grande résistance physique et chimique, les conteneurs **Pacazur** sont destinés au conditionnement des déchets infectieux et cytotoxiques, y compris les aiguilles et objets coupants.

**Homologués pour le transport par route, fer & mer** des matières infectieuses des codes UN3291 & UN3249 selon les spécifications ADR/RID/IMDG.

**Contrôle des fabrications attesté par le BVT**, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD du 29 mai 2009).

**Conformité aux normes NF EN ISO 23907 et NF X 30-511 (IBE)** : perforation, étanchéité, stabilité, résistance des poignées, ...

**Conformité à l'arrêté DGS du 24/11/2003** (SANPO324585A) modifié par l'Arrêté du 27/06/2016 (NOR:AFSP1609519A).

**Incinération sans risque** d'émanations nocives. **Autoclavage** testé à 134°C.

Documentation & certificats disponibles d'un clic sur nos offres et téléchargeables sur [www.plazur.fr](http://www.plazur.fr)

## **Pacazur**: GAMME CONCUE POUR LA SECURITE DES UTILISATEURS

Les emballages **Pacazur** sont conçus pour favoriser une utilisation qui préserve des troubles musculosquelettiques, des risques de contamination et de piqûres.

- **Manutention sécurisée** : 3 poignées de transport solidaires du fût (2 latérales et 1 frontale indépendante du couvercle).
- **Couvercle sur charnière** (breveté) : fermeture entre 2 utilisations conforme aux exigences EN ISO 23907 et sans contrainte pour la fermeture définitive.
- **Fermeture inviolable sans effort et sans risque de compactage** : 11 points de fermeture clipsables avec 2 doigts. Joint d'étanchéité Hot-Melt.
- **Stabilité exceptionnelle** : base large, empreinte de gerbage sur couvercle.
- **Chariots d'aide à la manutention** avec pédale d'ouverture du couvercle.
- Traçabilité : **Cuves identifiées par un numéro unique (code-barre)**.
- Formes **ergonomiques**. Esthétique soignée.
- Coloris, palettisations & marquages personnalisables.

VOIR LA VIDEO D'UTILISATION




<http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4>



Caractéristiques Techniques	30L	50L	60L
Référence couvercle standard	PP30JJ	PP50JJ	PP60JJ
Référence avec obturateur	PO30JJ	PO50JJ	PO60JJ
Dimensions extérieures (mm)	400x330x310	400x330x540	400x330x680
Poids à vide PP - PO (kg)	1,08 - 1,2	1,58 - 1,7	1,98 - 2,1
Homologation ADR	3H2/Y20/S/-/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y25/S/-/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y30/S/-/F/BVT 31918/PLAZUR
Masse brute maximale	20 kg	25 kg	30 kg
Marquage	Marquage réglementaire conforme à l'arrêté DGS du 24/11/2003 et aux normes NF X 30-511 et 505, EN ISO 23907 avec étiquette de danger, N° ONU, limite de remplissage, mode d'emploi, ...		
Conditionnement	sur palette, couvercles séparés		
Nombre par palette	216	198	162
Dimensions palette (Lxlxh / cm)	100x120x200		
Poids palette (tout / kg)	243	322	321

## **Pacazur** : VERSION COUVERCLE AVEC OBTURATEUR (réf PO...)

**1 couvercle à trou (ø 130 mm) avec un obturateur sur charnière :**

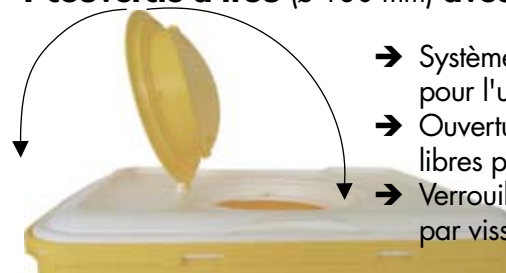

- Système breveté, assemblage durable initial pour l'usage normé.
- Ouverture assistée sur charnière, mains libres pour le remplissage.
- Verrouillage étanche, temporaire et définitif, par vissage.


**Plazur**  
PRESERVONS L'ESSENTIEL

CONCUS, FABRIQUES EN FRANCE  
Marque déposée, Modèles brevetés



[www.plazur.fr](http://www.plazur.fr)

Distributeur :

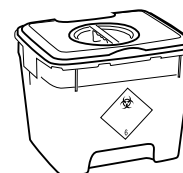

**Pacazur**®