


Fiche Technique Bain au lit Jube



Un système unique et très facile à mettre en œuvre pour faire la toilette de la personne âgée ou dépendante au lit
Notre bain au lit Jube est composé d'un plateau lit extrêmement rigide et plat, avec des flancs latéraux garantissant une étanchéité parfaite. Dans un premier temps, il faut disposer le patient sur le plateau en le roulant, puis fixer les flancs latéraux et le tuyau de vidange.

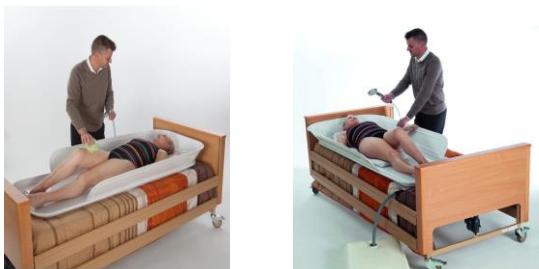

Le bain au lit Jube est livré avec une douchette très pratique qui se branche directement sur un robinet de lavabo ou de baignoire, le long flexible (11 mètres) permet un grand confort d'utilisation.

Livré avec matelas et oreiller de confort.

Le grand bidon de vidange a été étudié pour faciliter le travail des aidants : il est muni d'une poignée et se roule facilement.

Il dispose d'une butée permettant de l'accrocher facilement à la baignoire et vider l'eau sans effort.

Fabriqué en ABS renforcé.

Dimensions : Long. 175 x larg. 63 cm.

Poids 8,6 kg (partie la plus lourde : 5,8 kg).

Poids maximum supporté 100 kg