

545 bis



<i>Coloris stock permanent</i>	GRIS PASTEL	NOIR DECOR
<i>Code article</i>	1040001S1	1040001S2
<i>Code ACL</i>	3401542611285	3401542611346
<i>Code GTIN</i>	3615800001330	3615800001347
<i>Autre coloris</i>		
<i>Code article : 1040001</i>		
<i>Code ACL : 3401054005954</i>		
<i>Code GTIN : 3615800001316</i>		
<i>Famille :</i>		
Canne tripode et quadripode		
<i>Description :</i>		
Canne tripode acier, finition époxy		
Usage revendiqué :		
Aide à la marche manipulée avec un bras Usage intérieur ou extérieur		
Classe du dispositif :		
1 (non invasif)		
Garantie produit :		
2 ans contre tout vice de fabrication		



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 675 mm
- Hauteur* maxi : 915 mm
- Embase : 320 x 275 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 23 mm

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 2 positions de réglage
- Rallonge : tube alu anodisé 17.2x1.35mm – 8 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite.
- Blocage position de réglage : vis et écrou moleté zingués
- Bague anti jeu
- Poignée Maginot
- 3 embouts 19x40 noir

Poids du produit :

0,9 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998


Version mise sur le marché : 09/01/18

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE

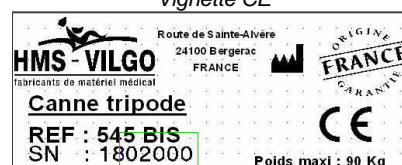

545 bis



Liste des pièces :

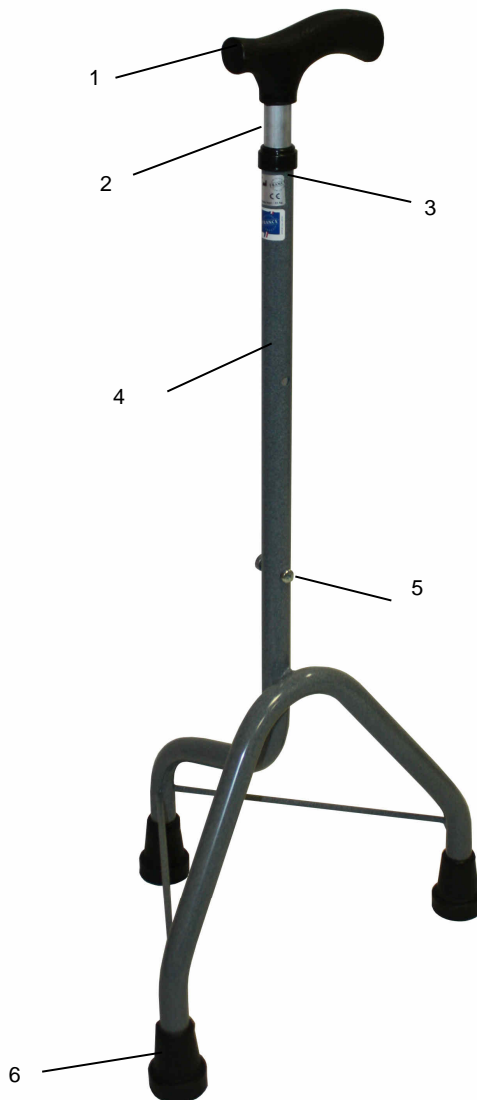

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée Maginot
2	E104005	1	Rallonge adulte 545 alu ano 17.2x1.35
3	A000003	1	Bague diam. 20 noire
4	E104000	1	Embase 545 adulte
5	A001056	1	Vis TCB 5x25 + écrou tri-quadri
6	A000218	3	Embout 19x40 noir