



IPL 8800
VELVET SKIN PRO


beurer
beauty

IPL VELVET SKIN PRO Appareil d'épilation longue durée

german
engineering



Application gratuite MyIPL pour vous guider lors de vos traitements -
Pour un traitement professionnel suivi à domicile

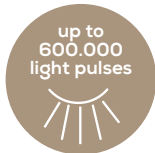

Jusqu'à 600 000 impulsions



Design sans fil pour une
utilisation plus facile



Détection de la couleur de peau- définit automatiquement le niveau d'énergie à utiliser

Nécessite seulement 21 minutes pour traiter le corps entier¹⁾

Surface lumineuse de 4,5 cm² pour un traitement ultra rapide

Avec fonction "flash en série" pour une utilisation rapide et confortable

6 niveaux d'intensité

Embout de précision pour le visage et le maillot

Technologie testée cliniquement - utilisation sécurisée à la maison

Une sécurité unique grâce au capteur 2 en 1 pour le type de peau et le type de contact

Jusqu'à 50% de poils en moins après 3 / 4 séances seulement

Technologie de lumière pulsée IPL ultramoderne utilisée

également par les dermatologues pratiquant une épilation

professionnelle. La lumière pulsée intense désactive les

follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse.

Protection UV intégrée pour protéger la peau

Ne convient pas aux peaux foncées



Peut être inefficace sur les peaux blanches ou trop claires

Incl. batterie Li ion 7.4 V~; 2500 mAh

Dimensions (LxH): 17.5 x 6.5 x 20 cm

Poids: approx. 480 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 57501 4

Item no.: 575.01



575.01_IPL8800_2020-02-03_01_DS_EN_BEU_Subject to errors and changes

* Dermatological study, 20 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0309-11

¹⁾ at minimum power level for arms, legs, face, armpits and the bikini line




german|engineering


IPL 8800
VELVET SKIN PRO

beurer
beauty


FONCTIONNEMENT

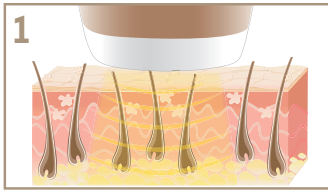

1 La mélanine des poils absorbe la lumière (IPL)

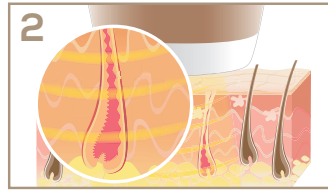


2 La chaleur produite désactive le follicule pileux

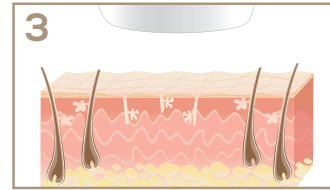

3 Le poil tombe et ne repousse plus

Tableau des teintes de poils et de peaux

		Skin color					
Hair color		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

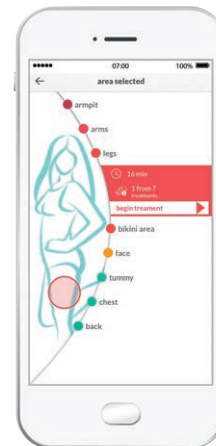

TRAITEMENT



works with

• iOS ≥ 8.0
• Android™ ≥ 4.4

Liste des appareils compatibles